


Oordop Vliegtuig SANOHRA fly voor volwassenen met middelgrote gehoorgangen
Oordop Vliegtuig SANOHRA fly voor kinderen vanaf één jaar en volwassenen met kleine gehoorgangen.

Oordop Vliegtuig SANOHRA fly beschermt het oor tegen snelle veranderingen in de luchtdruk, zoals dit bijv. tijdens het vliegen voorkomt.

Hoe ontstaat oorpijn tijdens het vliegen?

Het oor is een uiterst gevoelig zintuig. Achter het luchtdicht afsluitende trommelvlies ligt het middenoor. De ventilatie van het middenoor geschiedt door de buis van Eustachius. Tijdens de start neemt de cabinedruk snel af. Deze drukval veroorzaakt doorgaans geen problemen voor het oor, omdat de buis van Eustachius een relatieve overdruk in het middenoor alleen passief moet afdrukken. Tijdens de landing stijgt de luchtdruk binnen enkele minuten naar grondniveau. Als de buis van Eustachius de nu vereiste actieve opening niet snel genoeg tot stand kan brengen, ontstaat in het middenoor zo een hoge, relatieve onderdruk, dat een welving van het trommelvlies wordt veroorzaakt. Dit leidt tot oorpijn, maar kan zich ook manifesteren als gezichts- of kiespijn. Door het gebruik van de Air Pressure Control (APC-) filter van **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** worden luchtdrukveranderingen voor het trommelvlies vertraagd. **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** ondersteunt het oor, ook bij een verminderde werking van de buis van Eustachius, om zich pijnloos aan te passen aan sterk wisselende drukveranderingen.

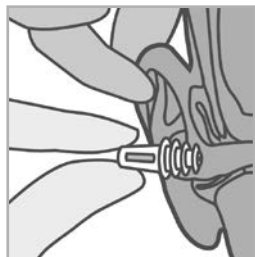

Hoe Oordop Vliegtuig SANOHRA fly in te brengen ?

Doe de arm over het hoofd en til de oorschelp aan de andere kant van het hoofd iets omhoog. Dit zal de gehoorgang verruimen. Pak het uiteinde van **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** met duim en wijsvinger van de andere hand vast en breng deze, met de lamellen vooraan, met licht draaiende bewegingen in de gehoorgang in. Bij het andere oor precies zo te werk gaan.

Wanneer moet Oordop Vliegtuig SANOHRA fly worden gebruikt?

Bij de start: Wie bij de start al last van oorpijn heeft, kan **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** het beste gebruiken voor-

dat het vliegtuig opstijgt. Na 30 minuten kan **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** er weer uitgehaald worden, omdat de drukverhoudingen doorgaans constant zijn, wanneer het vliegtuig de vlieghoogte heeft bereikt. Tijdens korte vluchten van minder dan 2 uur is het aanbevolen om **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** gedurende de gehele vlucht te dragen.



Bij de landing: Gebruik **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** zoals beschreven uiterlijk **45 minuten** voordat de landing inzet. Wacht niet af totdat de landing door de piloot wordt aangekondigd. Het wordt aanbevolen om de werking van de buis van Eustachius nog te versterken door middel van kauwen, slikken of geeuwen. Het oor wordt optimaal beschermd, wanneer **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** pas na de aankomst op de luchthaven eruit wordt gehaald. Dus buiten het vliegtuig, aangekomen in het airportgebouw.

Houd er rekening mee, dat **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** vanwege zijn functie ook leidt tot geluidvermindering (terwijl u toch alles blijft horen!).

Uithalen van Oordop Vliegtuig SANOHRA fly

Til de oorschelp voor het uithalen, net als bij het indoen, licht op. Haal de oorbescherming er niet abrupt uit, maar verwijder deze met licht draaiende bewegingen.

Kinderen mogen de gehoorbescherming alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Bij kinderen jonger dan 3 jaar moet erop worden gelet dat de gehoorbescherming alleen door volwassenen wordt ingezet en ook weer wordt verwijderd. Het gebruik van de gehoorbescherming dient vooraf met de behandelend arts te worden besproken. Niet gebruiken als het oor ontstoken is.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VERSTIKKING! KLEINE ONDERDELEN. Kinderen mogen de gehoorbescherming alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. De oordopjes moeten volgens de instructies van de fabrikant worden aangebracht, afgesteld en onderhouden.

Waarschuwingen voor het gebruik van SANOHRA fly
Let op: Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen en plaatsingsinstructies kan de beschermende werking van **SANOHRA fly** tegen lawaai aanzienlijk verminderen. Oordopjes moeten ononderbroken worden gedragen op lawaaierige plaatsen.

SANOHRA fly mag niet met water of reinigingsmiddelen worden gereinigd. De mineralen in het water kunnen de APC (drukregelaar) verstopen. Luchtvervuiling en oorsmeer kunnen dit ook veroorzaken. Gebruik voor een optimale werking **SANOHRA fly** voor maximaal 3 retourvluchten.

Controleer het product regelmatig op beschadigingen en vervang het indien nodig. Dit product kan schade oplopen door bepaalde chemische stoffen. Nadere informatie dient bij de fabrikant te worden opgevraagd. Het wordt aanbevolen om **SANOHRA fly** na gebruik in het meegeleverde doosje te bewaren. Het moet koel en droog worden bewaard. Alle onderdelen van de oordopjes zijn zo ontworpen en geproduceerd dat ze geen letsel veroorzaken wanneer ze gedragen worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Gegevens van het isolatie-effect

Geluidsisolatie: SNR = 24 dB, H = 23 dB, M = 21 dB, L = 20 dB

Frequentie [Hz]	Geluidsisolatie [dB]	Standaardafwijkingen [dB]	APV [dB]
63	23,0	4,1	18,9
125	24,6	4,4	20,2
250	22,6	4,5	18,1
500	26,6	4,9	21,7
1000	25,6	5,3	20,3
2000	28,8	4,6	24,2
4000	26,6	4,7	21,9
8000	34,2	7,9	26,3

Voldoet aan de Europese richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (CE) 89/686EWG, EN352-2:2002, EN24869-1. Notified Body PZT GmbH Number: 1974